

XWELL

Elevating care for every patients



 **swident**
WE SUPPORT YOUR PROFESSION



XWELL

La prima poltrona odontoiatrica multidisciplinare

In risposta all'evoluzione delle esigenze dei pazienti e alla crescente complessità delle procedure svolte in studio, Swident progetta soluzioni capaci di elevare lo standard di cura e l'esperienza complessiva dell'ambiente clinico.

La nuova XWELL nasce per offrire maggiore calma, controllo e comfort intuitivo durante ogni trattamento. Progettata con attenzione sia per il paziente sia per il professionista, incarna la nostra visione di uno spazio di cura che non si limita a supportare la precisione operativa, ma favorisce anche serenità, sicurezza e benessere.

Con XWELL, la poltrona odontoiatrica diventa un perfetto equilibrio tra funzionalità evoluta, autenticità progettuale e comfort superiore, a beneficio di chi cura e di chi viene curato.


XWELL è la prima poltrona odontoiatrica multifunzionale in Europa, progettata per rispondere alle nuove esigenze della pratica clinica contemporanea: dalla chirurgia orale ai trattamenti odontoiatrici estetici, fino alle procedure estetiche del viso in ambito odontoiatrico.



Consulto agevole

Interazione ideale tra dottore e paziente


La poltrona XWELL consente di definire la prima diagnosi e il piano di trattamento. Con il poggiamambe ripiegato, dentista e paziente possono interagire in modo più confortevole durante le consultazioni e le procedure che richiedono un accesso frontale diretto come l'uso dello scanner per il rilievo delle impronte, verifica frontale dei trattamenti e dei risultati in corso, trattamenti estetici odontoiatrici e trattamenti estetici viso.

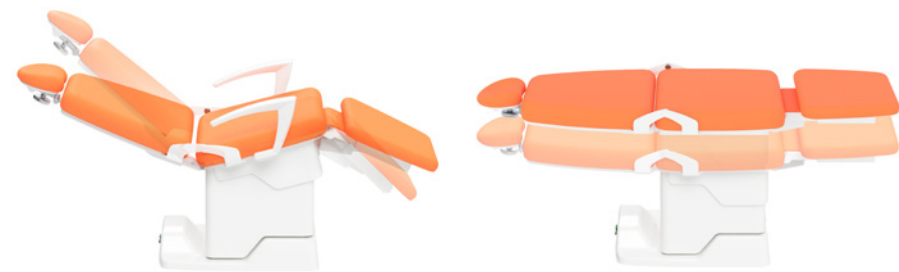

Ergonomia & Comfort

Quando lo schienale si reclina, la seduta si inclina all'indietro e il poggiamambe scorre verso l'esterno per offrire un supporto ottimale alle gambe. I movimenti indipendenti e/o sincronizzati di sedile, schienale e poggiapiede, garantiscono la migliore posizione ergonomica per l'operatore ed il

massimo comfort per il paziente, anche per i trattamenti prolungati. La pedana in posizione chiusa garantisce l'altezza della seduta a soli 480 mm da terra e grazie ad un movimento brevettato di estensione progressiva PLS (Progressive Leg Slide), offre il supporto sufficiente per gli arti inferiori.

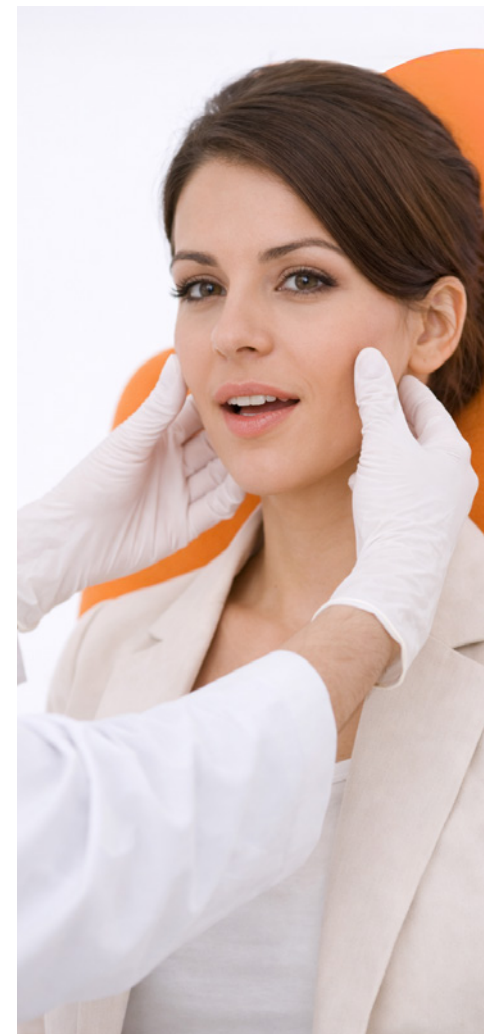



Sicurezza & accessibilità

Condizioni di lavoro ergonomiche ideali

La poltrona XWELL, agevola l'accessibilità ai pazienti più anziani, con mobilità ridotta o sovrappeso. L'altezza della seduta è allineata all'altezza standard della seduta di sedia a rotelle. La regolazione in altezza avviene con movimenti verticali, silenziosa senza bisogno di ulteriori regolazioni di postura per l'operatore.



Benvenuto relax

XWELL ha una larghezza seduta di 610 mm, ed un'altezza seduta da terra di soli 480 mm. La poltrona è estremamente compatta salvando spazio utile nella cabina. La stabilità è un'ulteriore caratteristica positiva di XWELL.

TRENDELENBURG



ORTOPNOICA



Pronti per ogni emergenza

Garantire la sicurezza del paziente è possibile grazie alla possibilità di raggiungere rapidamente la posizione di Trendelenburg (~20%) e la posizione ortopnoica.






XWELL DEN

Per trattamenti di odontoiatria

XWELL rappresenta l'innovazione nel campo dell'odontoiatria, offrendo una soluzione versatile ed altamente performante per le varie discipline dentali.

Questa poltrona, grazie alla forza del suo progetto unico e la sua tecnologia avanzata si è affermata come una scelta ineguagliabile per i professionisti del settore.

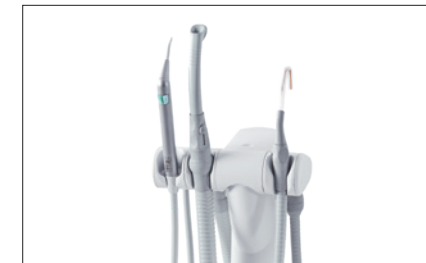

Braccio aspirazione (opzionale)

XWELL può essere configurata con due canule aspirazione e siringa. L'ergonomia è garantita grazie alla possibilità di regolare la posizione del braccio e la rotazione del gruppo alloggiamenti superiore.



Sempre la giusta posizione

Il braccio di aspirazione può essere posizionato sia a destra che a sinistra per il migliore approccio ergonomico al trattamento.



Poggiatesta Memory Foam (di serie)

Accoglie la testa del paziente con delicatezza, offrendo comfort e un naturale allineamento cervicale.





XWELL AES

Per trattamenti medico-estetici


L'innovativa poltrona XWELL, in configurazione orizzontale, offre funzionalità assimilabili a quelle di un lettino operatorio e, unica soluzione in Europa, consente l'accoglienza del paziente sia in posizione supina sia in posizione prona.

L'evoluzione della pratica clinica, caratterizzata da una crescente richiesta di trattamenti di odontoiatria estetica e di procedure di medicina estetica del volto, trova in XWELL una piattaforma operativa idonea a supportare tali applicazioni in modo efficiente e conforme ai requisiti clinici.




Estetica odontoiatrica

I trattamenti estetici odontoiatrici per migliorare l'aspetto del sorriso sono sempre più richiesti. XWELL supporta il professionista in procedure come: sbiancamento dentale professionale, faccette dentali, allineatori trasparenti, bonding estetico e gum contouring.

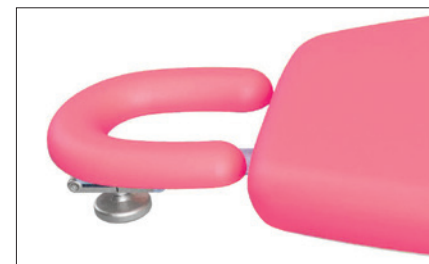

Poggiatesta U-SHAPE (opzionale)

La configurazione di XWELL consente il posizionamento del paziente in posizione supina o prona. In quest'ultima, il poggiatesta U-shape assicura un adeguato supporto del capo, garantendo comfort anche durante procedure prolungate.

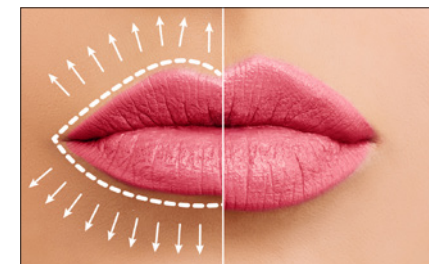

Medicina estetica in odontoiatria

XWELL supporta l'esecuzione di trattamenti di medicina estetica del volto in ambito odontoiatrico, consentendo procedure con filler dermici e tossina botulinica nel terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del volto, nel rispetto dei protocolli clinici e delle condizioni operative richieste.





XWELL OS

Per interventi di chirurgia orale

XWELL, unica in Europa, è la perfetta combinazione fra un lettino operatorio ed una poltrona odontoiatrica, risultando versatile ed altamente performante. La chirurgia orale è in profonda evoluzione. Gli interventi risultano essere sempre più impegnativi e di conseguenza le esigenze operative e tecniche crescono.

Per svolgere questi tipi di interventi con la massima professionalità e sicurezza sono necessarie soluzioni integrate di alto livello.



Smart cart

Dotato di 5 vani strumenti, può essere equipaggiato in base alle esigenze del professionista. Consente l'utilizzo di acqua distillata destinata agli spray degli strumenti.



Aspiratore

Un'aspirazione selettiva e precisa del sangue, dei tessuti e dei frammenti ossei. Dotato di doppio serbatoio, per assicurare più continuità lavorativa e zero fermi macchina.



Lampada chirurgica

Lampada LED di ultima generazione che garantisce luce fredda, lunga durata e basso consumo energetico. L'area visiva risulta illuminata in modo ideale garantendo ottime condizioni di lavoro e di comfort.



Accessori



Comando a pedale

Controllo completo della poltrona e dei programmi, per un utilizzo fluido e senza mani. Con tecnologia Wireless.



Telecomando (opzionale)

Controllo completo con tecnologia Wireless.



Lampada a led Maia (opzionale)

- Intensità luminosa 45000 lux, temperatura di colore 5000° K.
- Maniglie di movimentazione asportabili e autoclavabili.
- Rotazione su 2 assi.



Rails (opzionale)

Rails in acciaio inox per accessori vari.



Porta flebo (opzionale)

Attacco laterale per asta porta flebo.



Tavolo ponte (opzionale)

Tavolo ponte per interventi di chirurgia orale.




Poggiatesta Memory Foam (di serie)

Accoglie la testa del paziente con delicatezza, offrendo comfort e un naturale allineamento cervicale.



Poggiatesta U-SHAPE (opzionale)

La configurazione di XWELL consente il posizionamento del paziente in posizione supina o prona. In quest'ultima, il poggiatesta U-shape assicura un adeguato supporto del capo, garantendo comfort anche durante procedure prolungate.

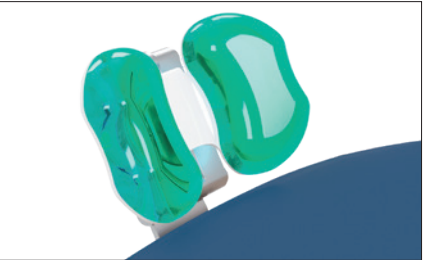

Poggiatesta Gelness (opzionale)

Il poggiatesta in **gel medicale**, con forma a V, garantisce comfort e stabilità adattandosi alla nuca, riducendo la pressione e mantenendo una temperatura neutra, per un benessere costante e un'esperienza migliore sia per il paziente che per il professionista.



Braccioli fissi (opzionali)

Coppia braccioli in alluminio.



Braccioli abbattibili (opzionali)


Coppia braccioli in alluminio, abbattibili per agevolare l'accesso del paziente laterale.



Tray (opzionale)

Tray con braccio pantografato regolabile.






Disegno tecnico

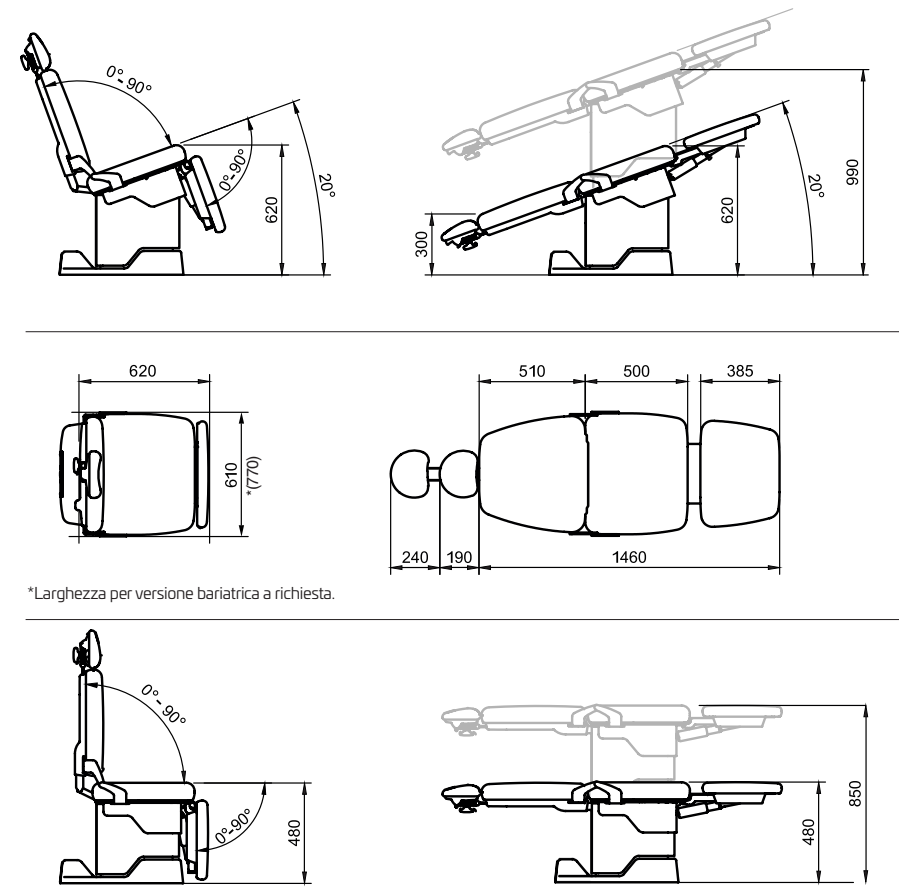

Dati tecnici

Altezza minima	mm	480
Altezza massima	mm	850
Angolo di inclinazione schienale	°	0° - 90°
Larghezza	mm	600
Lunghezza	mm	1850
Peso netto ca.	Kg	140
Capacità massima di sollevamento	Kg	200
Velocità di sollevamento (con 100 Kg)	mm/sec	22
Trendelenburg	°	20°
Classificazione		I
Classe		B

Colori

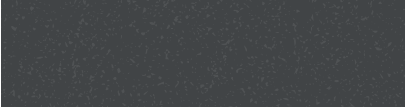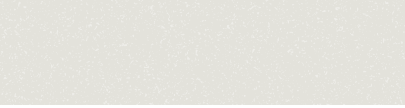 (901)	 (902)	 (903)	 (904)	 (905)
 (906)	 (907)	 (908)	 (909)	 (910)
 (911)	 (912)	 (913)	 (914 - glitter)	 (915 - argento)
 (916 - glitter)	 (917)	 (918)	 (920)	 (921 - oro)
 (922)	 (923)	 (924)	 (926)	 (927)

XWELL

 SW SWIDENT SA

Via G. Cattori, 3
6902 Paradiso
Lugano
Switzerland

www.swident.ch



SWIDENT SRL

Via Rossini, 26
40055 Villanova di Castenaso (BO), Italy
Tel. +39 051 6258657

info@swident.it

www.swident.it